



# Guide de mise en route rapide du modèle 7500

## DÉFINITION DES PARAMÈTRES UTILISATEUR PAR DÉFAUT

1. Mettez l'appareil sous tension – Examinez les paramètres usine ci-dessous.
2. Parcourez TOUS les paramètres à l'aide du bouton LIMITES.
3. S'il y a lieu, modifiez les paramètres à l'aide du bouton ou .
4. Vous DEVEZ appuyer sur le bouton LIMITES après chaque modification pour confirmer et poursuivre.
5. Faites défiler jusqu'à la fin des paramètres, jusqu'au 2<sup>e</sup> symbole ( = minutes) et appuyez sur le bouton LIMITES .
6. L'appareil fera automatiquement défiler les nouveaux paramètres.
7. POUR ENREGISTRER LES PARAMÈTRES – appuyez sur le bouton SILENCE ALARMES sans le relâcher tout en appuyant brièvement sur le bouton LIMITES – “dEF On” clignote.

### Rétablissement des paramètres usine par défaut

**Remarque :** Les valeurs par défaut définies par l'utilisateur sont perdues une fois les paramètres usine par défaut rétablis.

1. Mettez l'appareil sous tension – “dEF On” s'affiche.
2. Appuyez sur le bouton SILENCE ALARMES sans le relâcher tout en appuyant brièvement sur le bouton – “dEF OFF” clignote.
3. Appuyez sur le bouton ALIMENTATION jusqu'à ce que l'appareil se mette hors tension, puis remettez-le SOUS TENSION.

### Réglages usine par défaut

Les valeurs de droite sont programmées dans le modèle 7500. Le mode Sécurité patient est DÉACTIVÉ, sauf si l'utilisateur l'active.

LÉGENDE	Paramètre	Réglage usine	Options de réglage	Incrément
	Limite d'alarme inférieure de SpO <sub>2</sub>	85 %	Arrêt, 50 à 95	1 %
	Limite d'alarme supérieure de fréquence du pouls	200 b.min <sup>-1</sup>	Arrêt, 75 à 275	5 b.min <sup>-1</sup>
	Limite d'alarme inférieure de fréquence du pouls	50 b.min <sup>-1</sup>	Arrêt, 30 à 110	5 b.min <sup>-1</sup>
	Limite d'alarme supérieure de SpO <sub>2</sub>	Arrêt	Arrêt, 80 à 100	1 %
	Volume d'alarme	Élevée	Arrêt, Bas, Haut	Sans objet
	Moyenne d'oxymétrie	Non	Oui, Non	Sans objet

## ACTIVATION DU MODE SÉCURITÉ PATIENT

1. Mettez l'appareil sous tension – Examinez les paramètres usine ci-dessous.
2. Parcourez TOUS les paramètres à l'aide du bouton LIMITES .
3. S'il y a lieu, modifiez les paramètres à l'aide du bouton ou .
4. Vous DEVEZ appuyer sur le bouton LIMITES après chaque modification.
5. Faites défiler jusqu'à la fin des paramètres, jusqu'au 2<sup>e</sup> symbole ( = minutes) et appuyez sur le bouton LIMITES .
6. L'appareil examine automatiquement les nouveaux paramètres.
7. POUR ENREGISTRER LES PARAMÈTRES – appuyez sur le bouton SILENCE ALARMES sans le relâcher tout en appuyant brièvement sur le bouton LIMITES – “dEF On” clignote.
8. Appuyez sur le bouton ALIMENTATION jusqu'à ce que l'appareil se mette HORS TENSION.
9. POUR DÉFINIR – Appuyez sur le bouton SILENCE ALARMES sans le relâcher tout en remettant l'appareil SOUS TENSION.
10. “SEC On” clignote sur l'écran.

**Remarque :** Pour régler l'alarme “O<sub>2</sub> basse” à moins de 85 %, vous devez définir les paramètres utilisateur par défaut dans un premier temps, puis suivre la procédure ci-dessus.

### Désactivation du mode Sécurité patient

1. Appuyez sur le bouton ALIMENTATION jusqu'à ce que l'appareil se mette HORS TENSION.
2. Appuyez sur le bouton SILENCE ALARMES , puis sans le relâcher, sur le bouton LIMITES et enfin sur le bouton ALIMENTATION .
3. “SEC OFF” s'affiche sur l'écran.

## RECUEIL ET TÉLÉCHARGEMENT DE DONNÉES

### Recueil de données

1. Mettez l'appareil sous tension – L'enregistrement démarre automatiquement.

**Remarque :** Les données de moins d'une minute ne sont pas enregistrées.

### Téléchargement des données vers un PC

**Remarque :** Le mode Sécurité patient doit être DÉACTIVÉ.

1. Appuyez sur le bouton ALIMENTATION jusqu'à ce que l'appareil se mette HORS TENSION.
2. Branchez l'appareil sur le PC à l'aide du câble de téléchargement 7500SC.
3. Initialisez nVISION et sélectionnez FICHER>Nouvelle capture de données, puis cliquez sur l'option Oxymètre 7500.
4. Sur le 7500, appuyez sur les boutons et ALIMENTATION sans les relâcher - le message “PLA bAC” s'affiche sur l'appareil durant le téléchargement.
5. Une fois le téléchargement terminé, l'appareil repasse en mode opératoire normal.


## POUR EFFACER LA MÉMOIRE

1. Mettez l'appareil sous tension .

**Remarque :** Le mode Sécurité patient doit être DÉACTIVÉ.

2. Appuyez sur le bouton LIMITES jusqu'à ce que “CLR no” s'affiche.
3. Appuyez sur le bouton jusqu'à ce que “CLR YES” s'affiche.
4. Appuyez sur le bouton LIMITES pour confirmer.
5. “dEL no” s'affiche - appuyez sur le bouton pour afficher “dEL YES”.
6. Appuyez sur le bouton LIMITES pour confirmer.
7. “dnE CLR” confirme l'effacement de la mémoire.

Pour les caractéristiques techniques complètes, reportez-vous au manuel d'utilisation.

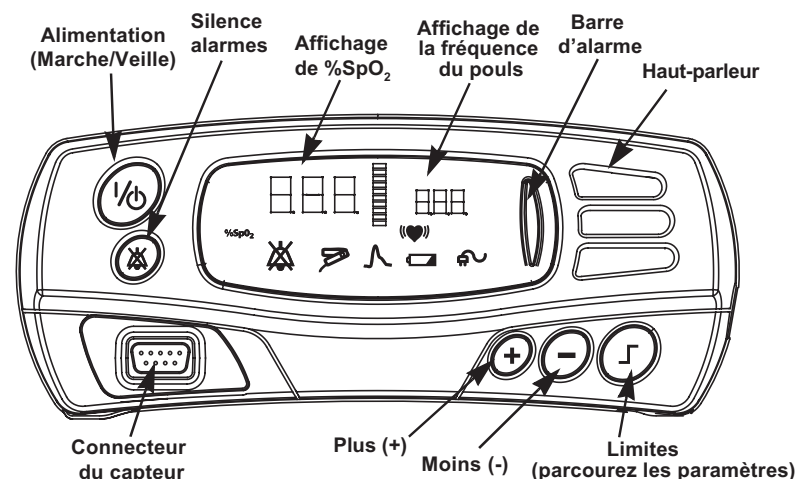



<https://www.nonin.com/support/7500/>

EN: Translations of this quick start guide can be found using this QR code or on the USB for the Model 7500 operator's manual.

FR: Les traductions de ce guide de démarrage rapide sont accessibles à l'aide de ce code QR ou sur la clé USB contenant le manuel de l'opérateur du modèle 7500.

DE: Übersetzungen dieser Schnellstartanleitung finden Sie über diesen QR-Code oder auf dem USB für die Bedienungsanleitung des Modells 7500.

IT: Le traduzioni di questa guida rapida sono reperibili utilizzando questo codice QR o sull'USB per il Manuale dell'operatore del modello 7500.

ES: Las traducciones de esta guía de inicio rápido se pueden encontrar mediante este código QR o en la unidad USB para el manual del operador del modelo 7500.

PT: Vertalingen van de gebruikershandleiding voor Model 7500 zijn terug te vinden via deze QR-code of op de USB-stick.

NL: Vertalingen van de gebruikershandleiding voor Model 7500 zijn terug te vinden via deze QR-code of op de USB-stick.

EL: Μπορείτε να βρείτε μεταφράσεις του εγχειριδίου χειριστή για το Μοντέλο 7500 χρησιμοποιώντας αυτόν τον κωδικό QR ή στη μονάδα USB.

DA: Oversættelser af brugervejledningen for Model 7500 findes ved hjælp af denne QR-kode eller på USB-drevet.

SV: Översättningar av driftsmanualen för modell 7500 hämtas med hjälp av QR-koden eller på USB-drivenheten.

FI: Mallin 7500 käyttöoppaan käännökset löytyvät käyttämällä tätä QR-koodia tai USB-tikulta.

PO: Dostęp do tłumaczeń instrukcji użytkowania modelu 7500 można uzyskać za pomocą niniejszego kodu QR lub korzystając z nośnika USB.

NO: Oversettelser av bruksanvisningen til Model 7500 finner du ved hjelp av QR-koden eller på minnepennen.

# Modèle 7500

## Guide de mise en route rapide

